

07 수동휠체어



혼자서 걸을 수 없거나 걷기 힘든
고령자의 이동을 도와줍니다.




사용방법

1




수동휠체어에 앉고 일어설 때는 주차 브레이크를
고정하고 발판을 위로 올린 다음 양 팔걸이를 잡고
천천히 앉고 일어섭니다.

2

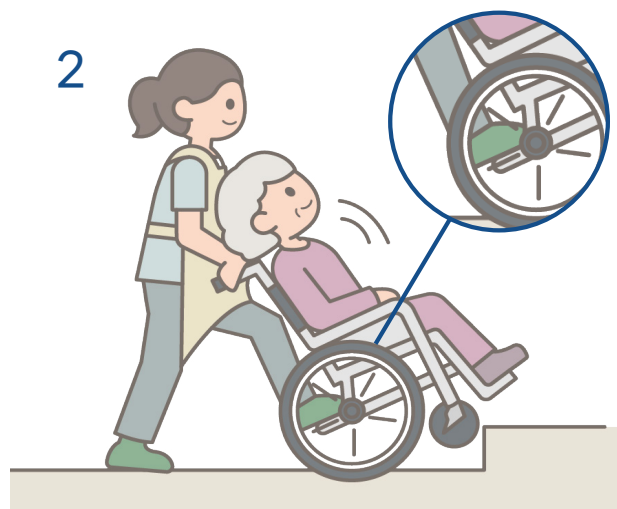

수동휠체어를 타고 턱을 넘어갈 때는 넘어짐에
주의하며 휠체어 뒤의 발판을 밟아 휠체어의
앞부분을 턱 위로 올려서 이동합니다.

제품선택 고려사항

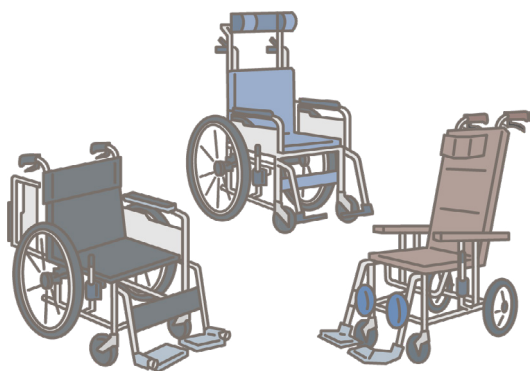

사용자가 목을 가눌 수 없는 경우 목받침이 있는
수동휠체어를 선택하도록 하고, 휠체어를 옆으로
탑승해야만 하는 경우 팔걸이가 올라가는 제품을
선택하는 것이 편리합니다.



안전사고 사례

- 휠체어에서 내릴 때 발판을 위로 올리지
않아 발판을 밟고 내리면서 앞으로
넘어지는 사고가 발생함
- 주차브레이크를 고정하지 않고
휠체어에서 앉아 휴식을 취하다가
휠체어가 갑자기 굴러가는 사고가
발생함